
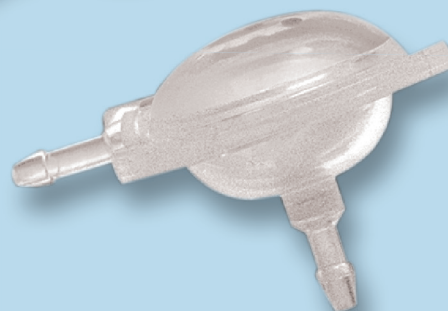


Válvulas de Controle de Vazão CSF PS Medical®


Uma ampla gama de válvulas de pressão fixa para atender às necessidades do seu paciente

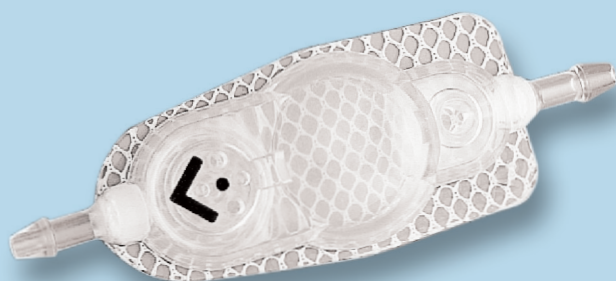


Medtronic

Válvulas de Controle de Fluxo CSF

- » As válvulas de controle de fluxo CSF são fabricadas com materiais diferentes, reduzindo assim a possibilidade de colagem e deformação da válvula
- » Cúpula de elastômero de silicone permite injeção de agulha percutânea
- » O protetor de agulha de polipropileno minimiza o potencial de uma agulha penetrando completamente na válvula
- » Válvulas Contornadas e Ultra Pequenas fornecem descarga de duas vias, eliminando a necessidade de reservatórios separados
- » O caminho do fluxo interno é descomplicado
- » Conectores integrais facilitam a fixação do cateter
- » O desenho não metálico não interferirá nas tomografias, nem na ressonância magnética
- » Os indicadores radiopacos mostram a pressão da válvula, a direção do fluxo e a aproximação da válvula ao cateter

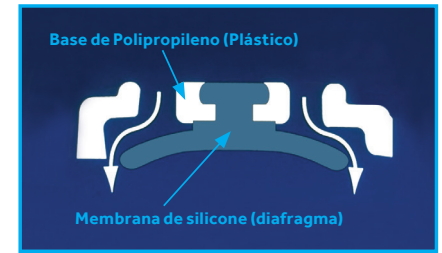


Base de polipropileno (plástico) com membrana de silicone (diafragma)

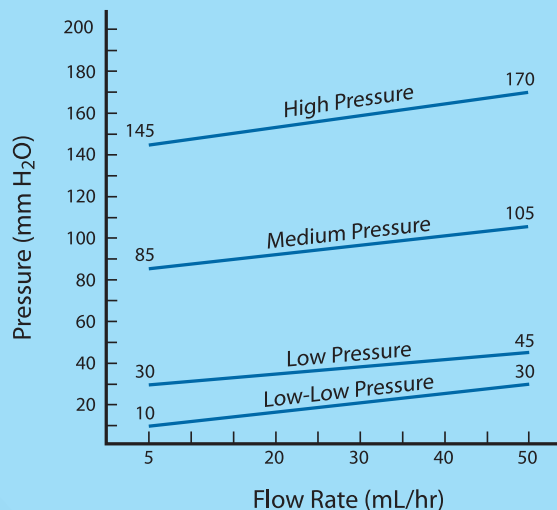

Características de Pressão/Fluxo de Válvulas de Controle de Fluxo CSF


NOTA: Os níveis descritos são valores medianos. Todas as válvulas executam dentro de +/- 25mm H₂O destes valores médios quando testados no momento da fabricação. As pressões baixo-baixo estão dentro de +/- 10mmH₂O a 5 ml/h e +/- 20mm H₂O a 50 ml/h no momento da fabricação.

Exemplo de Características Típicas do Produto Válvula Contornada

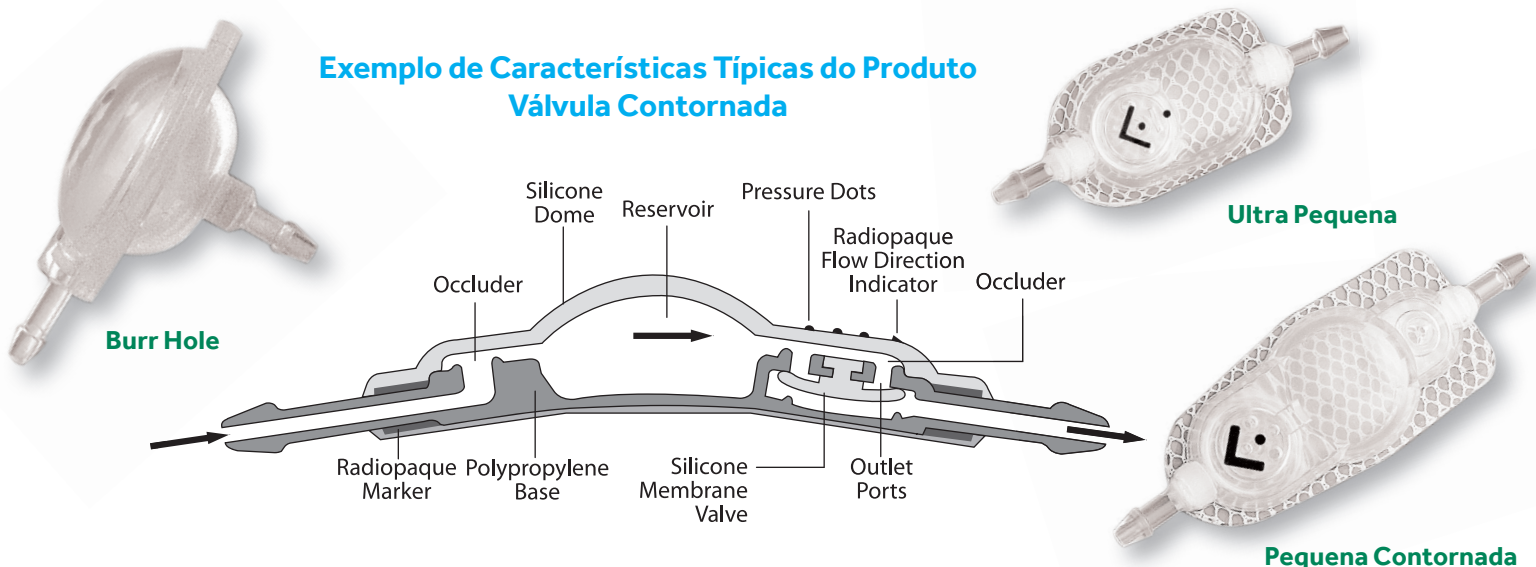


Válvulas de Controle de Fluxo CSF, Contornadas

O verdadeiro design "contornado" fornece um perfil de válvula inferior. Válvulas com contornos estão disponíveis em dois modelos para acomodar todos os grupos de pacientes.

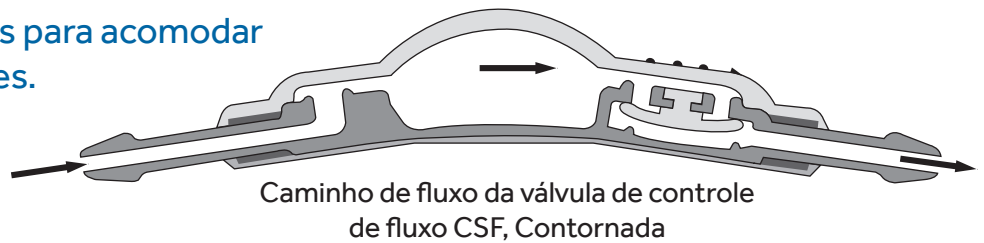

Válvulas de Controle de Fluxo CSF, Ultra Pequena

A válvula Ultra Pequena incorpora um design de baixo perfil para uso em bebês e crianças.

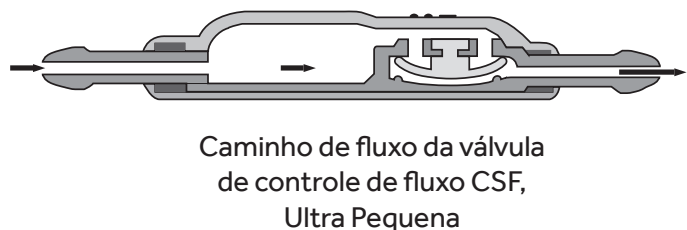


Válvulas de Controle de Fluxo CSF, Botão

A válvula de botão é fabricada com materiais diferentes, reduzindo assim a possibilidade de aderência e deformação da válvula.



Válvulas de Controle de Fluxo CSF, Burr Hole


As válvulas Burr Hole estão disponíveis nos modelos de 12 mm e 16 mm para acomodar a preferência cirúrgica.

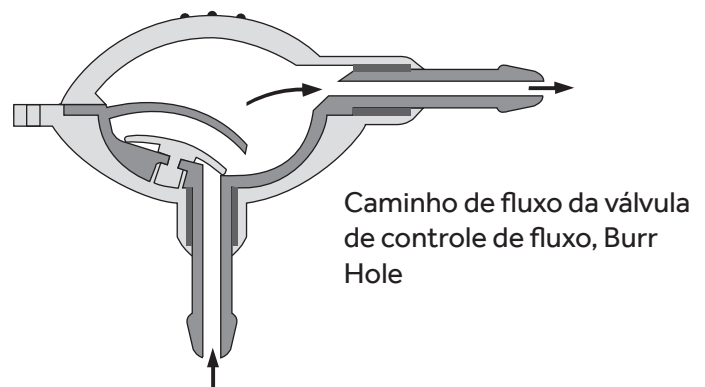

Informações para Pedidos


Válvula de Controle de Fluxo CSF, Contornada - Regular

REF No.	Pressão da Válvula
No. REF 23093	Pressão bem baixa
No. REF 42322	Pressão baixa
No. REF 42324	Pressão média
No. REF 42326	Pressão alta
No. REF 92322	Pressão baixa com BioGlide®
No. REF 92324	Pressão média with BioGlide®
No. REF 92326	Pressão alta com BioGlide®

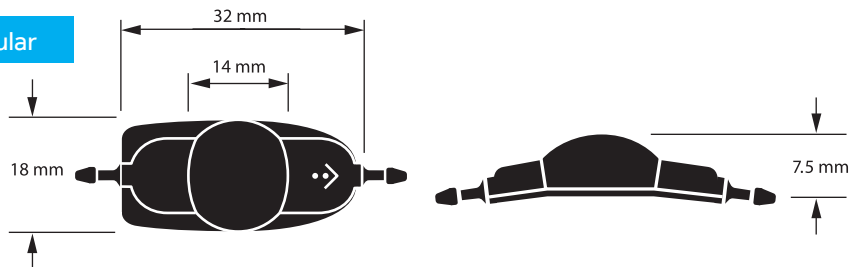


Válvula de Controle de Fluxo CSF, Contornada - Pequena

REF No.	Pressão da Válvula
No. REF 27102	Pressão bem baixa
No. REF 42312	Pressão baixa
No. REF 42314	Pressão média
No. REF 42316	Pressão alta
No. REF 92312	Pressão baixa com BioGlide®
No. REF 92314	Pressão média com BioGlide®
No. REF 92316	Pressão alta com BioGlide®

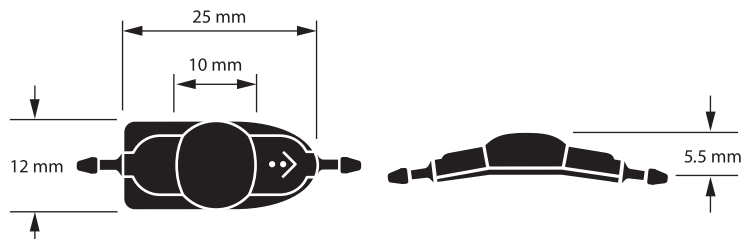

Válvula de Controle de Fluxo CSF, Ultra Pequena


REF No.	Pressão da Válvula
No. REF 42410	Pressão bem baixa
No. REF 42412	Pressão baixa
No. REF 42414	Pressão média

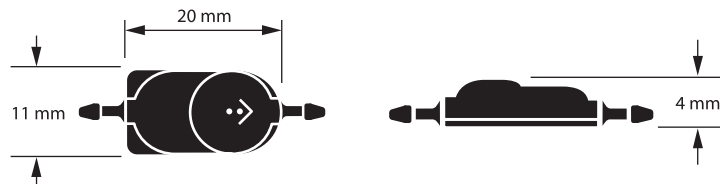

Válvula de Controle de Fluxo CSF, Botão


REF No.	Pressão da Válvula
No. REF 24003LL	Pressão bem baixa
No. REF 24003L	Pressão baixa
No. REF 24003M	Pressão média

Incluído com o produto: conector reto (não mostrado)

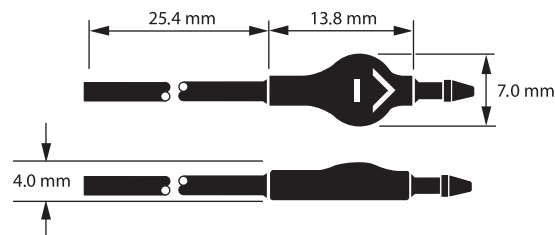


Válvula de Controle de Fluxo CSF, Burr Hole, 12 mm

REF No.	Pressão da Válvula
No. REF 42532	Pressão baixa
No. REF 42534	Pressão média
No. REF 42536	Pressão alta

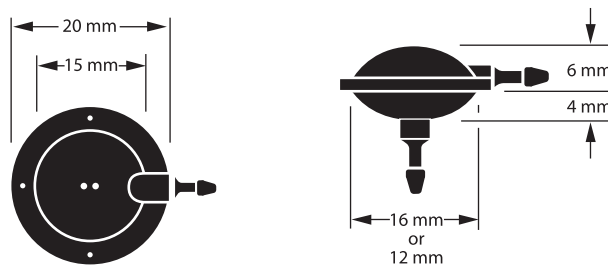

Válvula de Controle de Fluxo CSF, Burr Hole, 16 mm

REF No.	Pressão da Válvula
No. REF 42542	Pressão baixa
No. REF 42544	Pressão média
No. REF 42546	Pressão alta

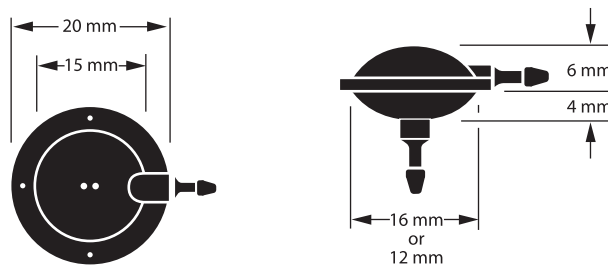

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
Cidade Monções, São Paulo - SP
CEP 04576-010
Brasil
Telefone: +55 11 2182-9200

Medtronic
Juntos, Além